

Скрининг колоректального рака с применением теста Cologuard


Что такое тест Cologuard®?

Тест Cologuard обнаруживает признаки рака толстой кишки в стуле (кале) пациента.

Тест Cologuard позволяет проводить неинвазивный скрининг. Его легко и быстро можно использовать дома.

Что входит в набор для сбора образцов Cologuard?

Вы получите набор для сбора образцов Cologuard по почте.

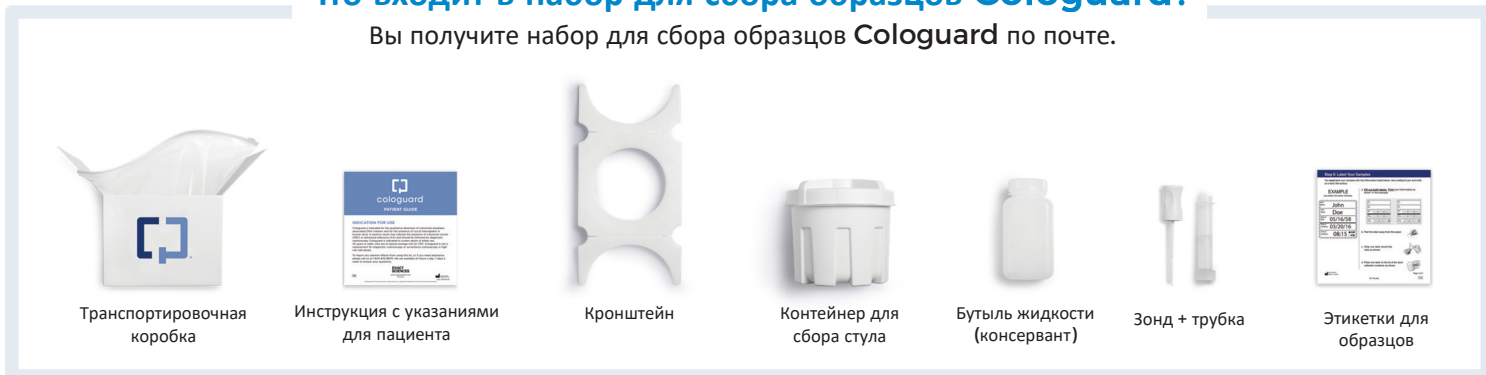

Как использовать набор для сбора образцов Cologuard?

1. Распакуйте комплект. Прочтите находящееся внутри руководство для пациента (на английском и испанском языке).
 - Установите в телефоне напоминание о необходимости использовать набор в течение 2 недель
2. Возьмите образец, когда сможете передать его в UPS® в тот же или на следующий день.
3. Отправьте свой образец в тот же день или на следующий день после его сбора.
 - Закажите бесплатный вызов курьера UPS (1-844-870-8870 или [Cologuard.com/UPS](https://cologuard.com/UPS)).
 - Передайте свой набор в UPS. Найдите пункты и часы работы на веб-сайте [Cologuard.com/UPS](https://cologuard.com/UPS). По воскресеньям или в праздники некоторые из этих пунктов закрыты
4. Ваш лечащий врач получит результат приблизительно через 2 недели после поступления вашего образца в Exact Sciences Laboratories.



Посмотрите видеоролик [Как использовать Cologuard](#) (на 13 языках)
Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке [Cologuard.com/use](https://cologuard.com/use)

У вас есть какие-либо вопросы?

Посетите веб-сайт [Cologuard.com](https://cologuard.com) или позвоните в Exact Sciences Laboratories по телефону 1-844-870-8870.

Показания к применению теста Cologuard и важная информация о рисках

Тест Cologuard предназначен для проведения профилактического обследования у взрослых в возрасте 45 лет и старше, находящихся в группе среднего риска развития колоректального рака; оно заключается в выявлении определенных ДНК-маркеров и крови в стуле. Не используйте этот метод, если у вас имеются аденомы, воспалительные заболевания кишечника и некоторые наследственные синдромы, а также если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи ранее был обнаружен колоректальный рак. Тест Cologuard не является заменой колоноскопии у пациентов из группы высокого риска. Эффективность теста Cologuard оценивалась у взрослых в возрасте 45–49 лет на основе большого клинического исследования, в котором принимали участие пациенты в возрасте 50 лет и старше. Результаты теста Cologuard следует интерпретировать с осторожностью. Положительные результаты теста не подтверждают наличие рака. Пациентам с положительным результатом теста должна быть назначена колоноскопия. Отрицательный результат теста не подтверждает отсутствие рака. Пациентам с отрицательным результатом теста следует обсудить со своим врачом, когда им следует проходить повторный анализ. Возможно получение ложно положительных и ложно отрицательных результатов. В клиническом исследовании у 13 % обследованных без наличия рака был получен положительный (ложно положительный) результат и у 8 % обследованных с раком получили отрицательный (ложно отрицательный) результат. Только по назначению врача.