

Cologuard® ምርመራ የአንጀት ካንሰር መመርመር

የCologuard ምርመራ በMedicare እና በአብዛኛዎቹ ዋና መድን ሰጪዎች የተሸፈነ ነው።

\$0 አብዛኛዎቹ የመድን ሽፋን ያላቸው ታካሚዎች Cologuard ምርመራ^{1*} **\$0** ይከፍላሉ።

96% በአገር አቀፍ ደረጃ፣ ከ**96%** በላይ የሚሆኑ የCologuard ታካሚዎች ለምርመራ^{1*} ከኪሳቸው ውጪ ወጪ የለባቸውም።



የበለጠ ይማሩ በ Cologuard.com/insurance ወይም በ **1-844-870-8870** ይደውሉ። የመድህን ኩባንያዎን ትክክለኛ ጥያቄዎች እንዲጠይቁ ልንረዳዎ እንችላለን።

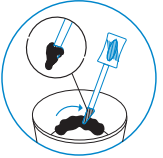
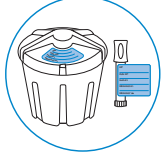
አብዛኛዎቹ የመድህን ኩባንያዎች የCologuard ምርመራው አዎንታዊ ከሆነ የኮሎንስኮፒ ክትትል ይከፍላሉ።^{2,3†}



የCologuard ምርመራ በቤት ውስጥ ለመጠቀም ቀላል ነው

ሙሉ ዝርዝር መመሪያዎች በCologuard Box ውስጥ አሉ

እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ቪዲዮ፡-
Cologuard.com/use

- 1 ይቀመጡ**
 - ዝግጁ ሲሆኑ የCologuard ምርመራን ይጠቀሙ።
 - ነጭ የናሙና መያዣዎን በመጸዳጃ ቤት ላይ ያስቀምጡ።
 - መጸዳጃ ቤት ላይ ቁጭ ይበሉ።
- 2 መጥረግ**
 - ወደ ነጭ የናሙና መያዣ ውስጥ ሰገራዎን ያስገቡ።
 - የተቀመጡትን (ሰገራ) በዱላ ጠርገው ከመሳሪያው ውስጥ መልሰው ወደ ቱቦው ያስገቡ።
- 3 ማራስ እና ማሸግ**
 - የናሙናውን መያዣ በፈሳሽ መከላከያ ይመሉ።
 - ናሙናዎ ውስጥ እንዳለ ትልቁን መያዣ ይዘጉ።
- 4 ምልክት እና መላክ**
 - ሁለቱንም መለያዎች ይመሉ።
 - ይህንን ኪት በ UPS® በኩል ወደ Exact Sciences ይመልሱ።



ናሙናዎን በነጻ ይመልሱ

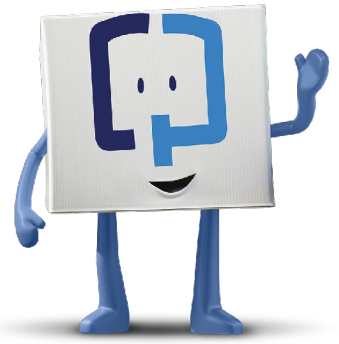
- የ UPS ማንሳትን በ Cologuard.com/UPS ላይ ያቅዱ ወይም ወደ **1-844-870-8870** ይደውሉ
- ኪትዎን ወደ UPS ይውሰዱ። የሀገር ውስጥ መደብሮችን እና የማረፊያ ሰዓቶችን በ Cologuard.com/UPS ላይ ያግኙ

*በታሪካዊ የታካሚ ክፍያ ላይ የተመሠረተ የExact Sciences የቅርብ ጊዜ ግምት።

†አብዛኛዎቹ ታካሚዎች ይህ ከጃንዋሪ 1፣ 2023 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል፣ እና ነፃ ሁኔታ ባላቸው የንግድ እቅዶች ላይ አይተገበርም።^{2,3}

የእርስዎ የCologuard® ሙከራ ውጤቶች

የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ናሙናዎን ከ Exact Sciences ከተቀበለ በኋላ ውጤቶችዎን ከ8-10 ቀናት ውስጥ ማግኘት አለባቸው።



የCologuard ምርመራ ሰገራዎ ውስጥ የተለወጠውን DNA እና ደም (የካንሰር ምልክቶችን) ይመለከታል⁴



አሉታዊ ውጤት ማለት የ Cologuard ምርመራ የካንሰር ምልክቶችን አላገኘም ማለት ነው። በጣም የሚመስለው የአንጀት እና ፊንጢጣ(colorectal) ካንሰር እንደሌለዎት ነው።⁴



አዎንታዊ ውጤት ማለት የCologuard ምርመራው የካንሰር ምልክቶችን አገኘ ማለት ነው። አዎንታዊ ውጤት ማለት ካንሰር አለብዎት ማለት አይደለም።⁴ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር የክትትል ቀጠሮ ይያዙ።

አንዳንድ ሰዎች የውሸት (የተሳሳቱ) አዎንታዊ እና አሉታዊ ውጤቶችን ያገኛሉ። ስለቀጣዩ የምርመራ እርምጃዎች ሁልጊዜ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ይጠይቁ።⁴

ተጨማሪ መረጃ እና ሺዲዮዎችን በሚከተለው ያግኙ፡-
Cologuard.com/UnderstandingResults

አመላካቾች እና አስፈላጊ የአደጋ መረጃ

የCologuard ምርመራው የተወሰኑ የDNA ምልክቶችን እና ሰገራ ውስጥ ያለውን ደም በመለየት በአማካይ ለcolorectal ካንሰር ተጋላጭ የሆኑትን 45 አመት እና ከዚያ በላይ የሆኑትን ሳይኖሩ ሳይሆኑ ለመመርመር ነው። adenomas (አዲኖማ) ካለብዎት፣ inflammatory bowel disease (የአንጀት በሽታ) እና አንዳንድ በዘር የሚተላለፍ ሲንድረም ካለብዎት፣ ወይም የcolorectal ካንሰር የግል ወይም የቤተሰብ ታሪክ ካለ እይጠቀሙ። የCologuard ምርመራ ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው ታካሚዎች ላይ የcolonoscopy ምትክ አይደለም። ከ45 እስከ 49 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉ አዋቂዎች ላይ የCologuard ምርመራ አፈጻጸም የሚገመተው ከ50 እና ከዚያ በላይ በሆኑ ታካሚዎች ላይ በተደረገ ትልቅ ክሊኒካዊ ጥናት ላይ በመመርኮዝ ነው።

የCologuard ምርመራ ውጤት በጥንቃቄ መተርጎም አለበት። አወንታዊ የምርመራ ውጤት ካንሰር መኖሩን አያረጋግጥም። አወንታዊ የምርመራ ውጤት ያላቸው ታካሚዎች ወደ colonoscopy ሊመሩ ይገባል። አሉታዊ የምርመራ ውጤት ካንሰር አለመኖሩን አያረጋግጥም። አሉታዊ የምርመራ ውጤት ያላቸው ታካሚዎች እንደገና መመርመር ሲያስፈልጋቸው ከሐኪማቸው ጋር መወያየት አለባቸው። ሐሰተኛ አዎንታዊ እና ሐሰተኛ አሉታዊ ውጤቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። በአንድ ክሊኒካዊ ጥናት ውስጥ ካንሰር የሌላቸው ሰዎች 13% አዎንታዊ ውጤት (ሐሰተኛ አዎንታዊ) እና ካንሰር ያላቸው ሰዎች 8% አሉታዊ ውጤት (ሐሰተኛ አሉታዊ) አግኝተዋል። Rx only

ዋቢዎች፡- 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physicianfee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2024. Cologuard Patient Brochure.