

# በCologuard® ምርመራ የአንጀት ካንሰር መመርመር

የCologuard ምርመራ በMedicare እና በአብዛኛዎቹ ዋና መድን ሰጪዎች የተሸፈነ ነው።

**\$0**

አብዛኛዎቹ የመድን ሽፍን ያላቸው ታካሚዎች Cologuard ምርመራ<sup>1\*</sup> \$0 ይከፍላሉ።

**96%**

በአገር አቀፍ ደረጃ፣ ከ96% በላይ የሚሆኑ የCologuard ታካሚዎች ለምርመራ<sup>1\*</sup> ከኪሳቸው ውጪ ወጪ የለባቸውም።



የበለጠ ይማሩ በ [Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance) ወይም በ **1-844-870-8870** ይደውሉ። የመድህን ኩባንያዎን ትክክለኛ ጥያቄዎች እንዲጠይቁ ልንረዳዎ እንችላለን።

አብዛኛዎቹ የመድህን ኩባንያዎች የCologuard ምርመራው አዎንታዊ ከሆነ የኮሎንስኮፒ ክትትል ይከፍላሉ።<sup>2,3†</sup>




## የCologuard ምርመራ በቤት ውስጥ ለመጠቀም ቀላል ነው

ሙሉ ዝርዝር መመሪያዎች በCologuard Box ውስጥ አሉ

እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ቪዲዮ፡- [Cologuard.com/use](https://Cologuard.com/use)

**1**


ይቀመጡ

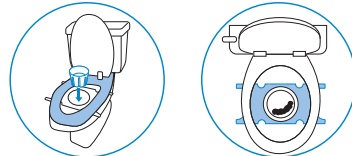

- ዝግጁ ሲሆኑ የCologuard ምርመራን ይጠቀሙ።
- ነጭ የናሙና መያዣዎን በመጸዳጃ ቤት ላይ ያስቀምጡ።
- መጸዳጃ ቤት ላይ ቁጭ ይበሉ።

**2**


መጥረግ

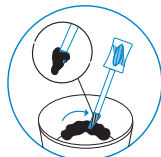

- ወደ ነጭ የናሙና መያዣ ውስጥ ሰገራዎን ያስገቡ።
- የተቀመጡትን (ሰገራ) በዱላ ጠርገው ከመሳሪያው ውስጥ መልሰው ወደ ቱቦው ያስገቡ።

**3**


ማራስ እና ማሸግ

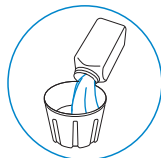

- የናሙናውን መያዣ በፈሳሽ መከለከያ ይሙሉ።
- የናሙናው ውስጥ እንዳለ ትልቁን መያዣ ይዘጉ።

**4**

ምልክት እና መላክ

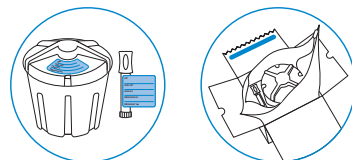

- ሁለቱንም መለያዎች ይሙሉ።
- ይህንን ኪት በ UPS® በኩል ወደ Exact Sciences ይመልሱ።



ናሙናዎን በነጻ ይመልሱ

1. የ UPS ማንሳትን በ [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) ላይ ያቅዱ ወይም ወደ **1-844-870-8870** ይደውሉ


2. ኪትዎን ወደ UPS ይውሰዱ። የሀገር ውስጥ መደብሮችን እና የማረፊያ ሰዓቶችን በ [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) ላይ ያግኙ

\*በታሪካዊ የታካሚ ክፍያ ላይ የተመሠረተ የExact Sciences የቅርብ ጊዜ ግምት።

†አብዛኛዎቹ ታካሚዎች ይህ ከጃንዋሪ 1፣ 2023 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል፣ እና ነፃ ሁኔታ ባላቸው የንግድ እቅዶች ላይ አይተገበርም።<sup>2,3</sup>

# የእርስዎ የCologuard® ሙከራ ውጤቶች

የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ናሙናዎን ከ Exact Sciences ከተቀበለ በኋላ ውጤቶችዎን ከ8-10 ቀናት ውስጥ ማግኘት አለባቸው።

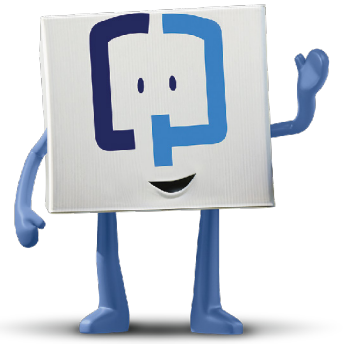

የCologuard ምርመራ ሰገራዎ ውስጥ የተለወጠውን DNA እና ደም (የካንሰር ምልክቶችን) ይመለከታል።<sup>4</sup>



አሉታዊ ውጤት ማለት የ Cologuard ምርመራ የካንሰር ምልክቶችን አላገኘም ማለት ነው። በጣም የሚመስለው የአንጀት እና ፊንጢጣ(colorectal) ካንሰር እንደሌለዎት ነው።<sup>4</sup>



አዎንታዊ ውጤት ማለት የCologuard ምርመራው የካንሰር ምልክቶችን አገኘ ማለት ነው። አዎንታዊ ውጤት ማለት ካንሰር አለብዎት ማለት አይደለም።<sup>4</sup> ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር የክትትል ቀጠሮ ይያዙ።

አንዳንድ ሰዎች የውሸት (የተሳሳቱ) አዎንታዊ እና አሉታዊ ውጤቶችን ያገኛሉ። ስለቀጣዩ የምርመራ እርምጃዎች ሁልጊዜ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ይጠይቁ።<sup>4</sup>

ተጨማሪ መረጃ እና ቪዲዮዎችን በሚከተለው ያግኙ፡- [Cologuard.com/UnderstandingResults](https://Cologuard.com/UnderstandingResults)

## አመላካቾች እና አስፈላጊ የአደጋ መረጃ

የCologuard® እና Cologuard Plus® ምርመራዎቹ የተወሰኑ የDNA ምልክቶችን እና ሰገራ ውስጥ ያለውን ደም በመለየት በአማካይ ለኮሎሬክታል (አንጀት) ካንሰር ተጋላጭ የሆኑትን 45 አመት እና ከዚያ በላይ የሆኑትን ህጻናትን ለመመርመር ነው። የኮሎሬክታል (አንጀት) ካንሰር ወይም በአንጀት ውስጥ የሚገኝ የቅድመ-ካንሰር እባጭ የግል ታሪክ ካለብዎት፣ የአንጀት እብጠት (ቁስለት) በሽታ ካለብዎት፣ የኮሎሬክታል (አንጀት) ካንሰር የቤተሰብ ታሪክ ካለብዎት ወይም የተወሰኑ በዘር የሚተላለፉ ደምረህመሞች (ቅምረ ህመሞች) ካለብዎት ወይም በዚያ ምርመራ በሚመከረው የመመርመር ማጣሪያ ጊዜ ውስጥ ከሌላ የአንጀት ካንሰር የመመርመር ማጣሪያ ዘዴ አዎንታዊ ውጤት ካገኙ የCologuard ምርቶችን አይጠቀሙ። ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አንዳቸውም ቢሆኑ እርስዎን የሚመለከቱ ከሆነ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

የCologuard ውጤቶች በጥንቃቄ መተርጎም አለባቸው። አወንታዊ የምርመራ ውጤት ካንሰር መኖሩን አያረጋግጥም። አወንታዊ የምርመራ ውጤት ያላቸው ታካሚዎች ወደ colonoscopy ሊመሩ ይገባል። አሉታዊ የምርመራ ውጤት ካንሰር አለመኖሩን አያረጋግጥም። አሉታዊ የምርመራ ውጤት ያላቸው ታካሚዎች እንደገና መመርመር ሲያስፈልጋቸው ከሐኪማቸው ጋር መወያየት አለባቸው። ሐሰተኛ አዎንታዊ እና ሐሰተኛ አሉታዊ ውጤቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። Rx only።

**ጥበቃዎች:-** 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure.