

فحص سرطان القولون باستخدام اختبار Cologuard®

يتم تغطية اختبار Cologuard بواسطة Medicare ومعظم شركات التأمين الكبرى.

على الصعيد الوطني، أكثر من 96% من مرضى Cologuard لا يتحملون أي تكاليف إضافية للفحص*1

96%

يدفع معظم المرضى المؤمن عليهم \$0 مقابل اختبار Cologuard*1

\$0

تعرف على المزيد من Cologuard.com/insurance أو اتصل على الرقم 1-844-870-8870. يمكننا مساعدتك على طرح الأسئلة المناسبة على شركة التأمين الخاصة بك.




مقطع فيديو يوضح كيفية الاستخدام:
Cologuard.com/use

تغطي معظم شركات التأمين تكلفة إجراء منظار القولون الخاص بالمتابعة بعد الحصول على نتيجة إيجابية في فحص Cologuard.^{3,2}

اختبار Cologuard سهل الاستخدام في المنزل

التعليمات التفصيلية الكاملة موجودة في عبة Cologuard


- استخدم اختبار Cologuard عندما تكون جاهزًا.
- ضع حاوية العينة البيضاء على المراض.
- اجلس على المراض.

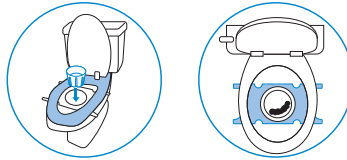

اجلس

1


- تبرز في حاوية العينة البيضاء.
- قم بكشط البراز الخاص بك باستخدام عصا ثم ضعه مرة أخرى في الأنبوب من المجموعة.

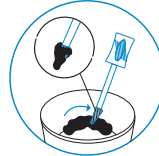

الكشط

2


- املاً حاوية العينة بمادة حافظة سائلة.
- أغلق الحاوية الكبيرة وعينتك بداخلها.

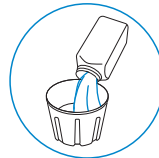

نقع وختم

3

- املاً كلا الملتصقين.
- أعد هذا الطقم إلى شركة Exact Sciences من خلال UPS®.

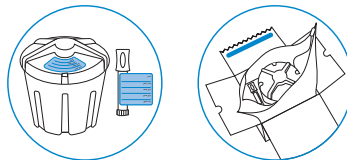

الملتصق والشحن

4

أعد عينتك مجانًا



1. حدد موعدًا لاستلام العينة بواسطة UPS من خلال Cologuard.com/UPS أو اتصل على الرقم 1-844-870-8870


2. انقل مجموعتك إلى UPS. يُمكنك البحث عن المتاجر المحلية وساعات التسليم على Cologuard.com/UPS

*تقييم حديث أجرته Exact Sciences بناءً على محفوظات فواتير المرضى.

†بالنسبة إلى معظم المرضى، سيسري ذلك في 1 يناير 2023، ولا ينطبق على الخطط التجارية ذات الحالة المعفاة.^{3,2}

نتائج اختبار Cologuard® الخاصة بك

يجب أن يكون لدى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك نتائجك متاحة في غضون 8-10 أيام بعد استلام Exact Sciences للعينة الخاصة بك.

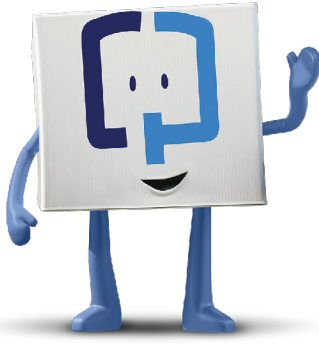

يبحث اختبار Cologuard عن الحمض النووي المتغير والدم (علامات السرطان) في البراز⁴

النتيجة السلبية تعني أن اختبار Cologuard لم يجد علاماتٍ محتملةً للسرطان. وهذا يعني أنك على الأرجح لا تعاني من سرطان القولون والمستقيم.⁴



النتيجة الإيجابية تعني أن اختبار Cologuard قد وجد علاماتٍ محتملةً للسرطان. النتيجة الإيجابية لا تعني أنك مصاب بالسرطان.⁴ حدد موعد متابعة مع مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.



يحصل بعض الأشخاص على نتائج إيجابية وسلبية كاذبة (غير صحيحة).
اسأل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك دائمًا عن الخطوات التالية للفحص.⁴

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات ومقاطع الفيديو على:
Cologuard.com/UnderstandingResults

دواعي الاستعمال ومعلومات مهمة عن المخاطر

إنّ اختباري Cologuard® وCologuard Plus® مخصصان لفحص البالغين من عمر ٤٥ عامًا فأكثر ممن لديهم احتمالية متوسطة لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك عن طريق الكشف عن وجود علامات حمض نووي DNA معينة ودم في البراز. لا تستخدم منتجات Cologuard إذا كان لديك تاريخ شخصي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو السلالات محتملة السرطان، أو إذا كنت مصابًا بمرض التهاب الأمعاء، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، أو متلازمات وراثية معينة، أو وجود نتيجة إيجابية من طريقة أخرى لفحص سرطان القولون خلال الفترة الزمنية الفاصلة الموصى بها لإجراء هذا الاختبار. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت أي من هذه الحالات تنطبق عليك.

ينبغي تفسير نتائج Cologuard بحذر. فلا تؤكد نتيجة الاختبار الإيجابية الإصابة بالسرطان. ينبغي إحالة المرضى الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية إلى منظار القولون. كما أن نتيجة الاختبار السلبية لا تؤكد عدم الإصابة بالسرطان. يجب على المرضى الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية أن يناقشوا مع طبيهم متى يحتاجون إلى إجراء الاختبار مرة أخرى. من الممكن الحصول على نتائج إيجابية كاذبة ونتائج سلبية كاذبة. في دراسة سريرية، حصل 13% من الأشخاص غير المصابين بالسرطان على نتيجة إيجابية (إيجابية زائفة) وحصل 8% من الأشخاص المصابين بالسرطان على نتيجة سلبية (سلبية زائفة) Rx only.

1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure