

Cologuard® စစ်ဆေးမှုဖြင့်အူမကြီးကင်ဆာအတွက် စစ်ဆေးမှုခံယူလိုက်ပါ

Cologuard စစ်ဆေးမှုကို Medicare နှင့် အကြီးစား အာမခံကုမ္ပဏီအများစုက ကျခံပေးပါသည်။

\$0 အာမခံကုမ္ပဏီ အများစုတွင် Cologuard စစ်ဆေးမှုအတွက် လူနာက **\$0** ပေးဆောင်ရပါသည်။*

96% တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် Cologuard လူနာများ၏ **96%** ကျော်သည် ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အိတ်စိုက်ကုန်ကျစရိတ် ပေးစရာမလိုပါ။*



ပိုမိုလေ့လာရန် Cologuard.com/insurance တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ သို့မဟုတ် **1-844-870-8870** ကို ခေါ်ဆိုပါ။ မှန်ကန်သော မေးခွန်းများ မေးမြန်းရန် သင်၏ အာမခံကုမ္ပဏီထံသို့ ဆက်သွယ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

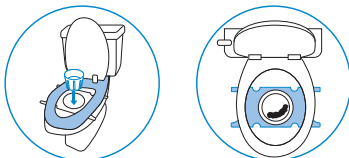
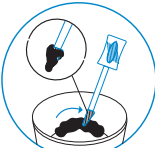
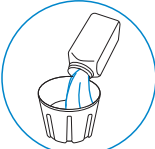
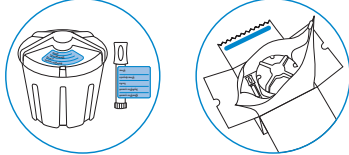
အာမခံကုမ္ပဏီအများစုသည် Cologuard စစ်ဆေးမှု ရောဂါရှာတွေ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုမှုအတွက် ကျခံပေးကြသည်။^{2,3†}



အသုံးပြုပုံ ဗီဒီယို-
Cologuard.com/use

Cologuard စစ်ဆေးမှုကို အိမ်တွင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည်

အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များသည် Cologuard ဗူးထဲတွင် ပါရှိသည်

- 1 SIT (ထိုင်ပါ)**

 - သင်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါ Cologuard စစ်ဆေးမှုကို အသုံးပြုပါ။
 - အိမ်သာပေါ်တွင် အဖြူရောင်နမူနာဗူးကို ထားပါ။
 - အိမ်သာတွင် ထိုင်ပါ။
- 2 SCRAPE (ကော် ယူပါ)**

 - အဖြူရောင်နမူနာဗူးထဲတွင် ဝမ်းသွားပါ။
 - သင်ဝမ်း (မစင်) ကို တုတ်ချောင်းဖြင့် ကော်ပြီး ပစ္စည်းမှ ပြန်ထဲတွင် ပြန်ထည့်ပါ။
- 3 SOAK & SEAL (စိမ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ)**

 - ဓာတုပစ္စည်းအရည်ဖြင့် နမူနာဗူးကို ဖြည့်ပါ။
 - သင့်နမူနာကို ထည့်ပြီး ဗူးအကြီးကို ပိတ်ပါ။
- 4 LABEL & SHIP (အညွှန်းတပ်ပြီး ပို့ပါ)**

 - အညွှန်းနှစ်ခုလုံးဖြည့်ပါ။
 - ဤပစ္စည်းကို UPS® ဖြင့် Exact Sciences သို့ ပို့ပါ။



သင်နမူနာကို အခမဲ့ပြန်ပို့ပါ

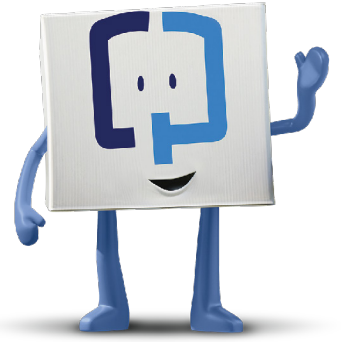
1. UPS ပစ္စည်းလာယူမှုကို Cologuard.com/UPS တွင် အချိန်စီစဉ်ပါ သို့မဟုတ် **1-844-870-8870** သို့ ခေါ်ဆိုပါ
2. သင့်ပစ္စည်းကို UPS သို့ ယူသွားပါ။ ဒေသတွင်း စတိုးများနှင့် ပို့ဆောင်ချိန်များကို Cologuard.com/UPS တွင်ရှာပါ

*Exact Sciences အစဉ်အလာအရ လူနာ ကျသင့်ငွေတောင်းခြင်းပေါ်အခြေခံ၍ လတ်တလော ခန့်မှန်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

†လူနာအများစုအတွက်၊ ၎င်းသည် ဇန်နဝါရီ 1 ရက် 2023 တွင် သက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လွတ်ကင်းခွင့်အခြေအနေများဖြင့် စီးပွားရေးအစီအစဉ်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။^{2,3}

သင်၏ Cologuard® စစ်ဆေးမှု ရလဒ်များ

သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် သင်၏နမူနာကို Exact Sciences လက်ခံရရှိပြီးနောက် 8-10 ရက်ခန့်အကြာတွင် သင့်ရလဒ်များကို ရရှိသင့်ပါသည်။



Cologuard စစ်ဆေးမှုသည် သင့်ဝမ်းဗိုက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသော DNA နှင့် သွေး (ကင်ဆာ၏ လက္ခဏာများ) ကို ရှာဖွေပါသည်။

-  ရောဂါပိုးမတွေ့ရလဒ်သည် Cologuard စစ်ဆေးမှုမှ ကင်ဆာလက္ခဏာမတွေ့ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သင်သည် အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာ မရှိနိုင်ပါ။⁴
-  ရောဂါပိုးတွေ့ရလဒ်သည် Cologuard စစ်ဆေးမှုမှ ကင်ဆာလက္ခဏာများ တွေ့သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ရောဂါပိုးတွေ့ရလဒ်သည် သင့်တွင် ကင်ဆာရှိသည်ဟု မဆိုလိုပါ။⁴ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသရန် ရက်ချိန်းရယူပါ။

အချို့သူများတွင် မှားယွင်း (မမှန်ကန်သော) ပိုးတွေ့နှင့် ပိုးမတွေ့ ရလဒ်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးရန် နောက်ထပ်အဆင့်များအကြောင်း သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကို အမြဲမေးပါ။⁴

နောက်ထပ် အချက်အလက်များနှင့် ဗီဒီယိုများ-
Cologuard.com/UnderstandingResults

အရိပ်လက္ခဏာများနှင့် အရေးကြီး အန္တရာယ် သတင်းအချက်အလက်များ

Cologuard စစ်ဆေးမှုသည် ဝမ်းတွင်း DNA ညွှန်မှတ်များနှင့် သွေးအချို့ကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အူမကြီးဆိုင်ရာ ကင်ဆာ ပျမ်းမျှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အသက် 45 နှစ် နှင့်အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကို စစ်ဆေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင့်တွင် ကင်ဆာအစပျိုးနေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းစေတတ်သော အူသိမ်အူမ ရောဂါနှင့် အချို့သော မျိုးရိုးလိုက်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများ သို့မဟုတ် အူမကြီးဆိုင်ရာ ကင်ဆာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် မိသားစုတွင်းဖြစ်ပွားခြင်းရှိပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။ Cologuard စစ်ဆေးမှုသည် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားနေသည့် လူနာများတွင် အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အစားထိုး မဟုတ်ပါ။ အသက် 45-49 နှစ်အရွယ် လူကြီးများတွင် Cologuard စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အသက် 50 နှင့်အထက် လူနာများ၌ အကြီးစားလက်တွေ့ စမ်းသပ်လေ့လာမှုပေါ်အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါသည်။

Cologuard စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို သတိပြု၍ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရပါမည်။ အပေါင်းလက္ခဏာ စစ်ဆေးမှုရလဒ်သည် ကင်ဆာရှိနေသည်ဟု အတည်မပြုပေး ပါ။ အပေါင်းလက္ခဏာ စစ်ဆေးမှုရလဒ်ထွက်ပေါ်သည့် လူနာများအား အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။ အနုတ်လက္ခဏာ စစ်ဆေးမှုရလဒ်သည် ကင်ဆာ မရှိကြောင်း အတည်မပြုပါ။ အနုတ်လက္ခဏာ စစ်ဆေးမှုရလဒ်ထွက်ပေါ်သည့် လူနာများသည် ထပ်မံ၍ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ မှားယွင်း၍ အပေါင်းပြခြင်းနှင့် မှားယွင်း၍ အနုတ်ပြခြင်းဟုဆိုသော ရလဒ်များ ထွက်ပေါ် နိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုတွင် ကင်ဆာရောဂါမရှိသည့် လူ 13% သည် အပေါင်းလက္ခဏာ ရလဒ် (မှားယွင်း၍ အပေါင်းလက္ခဏာပြခြင်း) ရရှိခဲ့ပြီး ကင်ဆာရောဂါရှိသည့် လူ 8% သည် အနုတ်လက္ခဏာ ရလဒ် (မှားယွင်း၍ အနုတ်လက္ခဏာပြခြင်း) ကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ Rx only

ကိုးကားချက်များ- 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physicianfee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2024. Cologuard Patient Brochure.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard နှင့် Exact Sciences သည် Exact Sciences Corporation ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်သည်။

© 2025 Exact Sciences Corporation. မူပိုင်ခွင့်အားလုံး လက်ဝယ်ပိုင်ခွင့်သည်။ M-US-CG-06568_Burmese_May 2025

 **cologuard®**
by EXACT SCIENCES