

اسکرینینگ سرطان کولون با تست Cologuard®

Medicare و اعظمی کمپنی‌های کلان بیمه مصرف تست Cologuard را پوشش میدهند.

در سطح کشور، بیشتر از 96% مرضیانی که از تست Cologuard استفاده میکنند کدام مصرف نقدی بابت اسکرینینگ تأدیه نمیکند*1

96%

بیشتر مرضیان دارای پوشش بیمه \$0 بابت تست Cologuard می‌پردازند*1

\$0

برای دریافت معلومات اضافی به Cologuard.com/insurance مراجعه کنید یا با 1-844-870-8870 به تماس شوید.
ما به شما کمک میکنیم تا سؤالهای درستی از کمپنی بیمه خود پرسیان کنید.




بیشتر کمپنی‌های بیمه، مصرف کولونوسکوپی دوم، بعد از مثبت شدن نتیجه اسکرینینگ Cologuard، را پوشش میدهند.^{2,3}

تست Cologuard را میتوان به آسانی در خانه انجام داد

طرز العمل کامل در Cologuard Box ارائه شده است

ویدئوی طرز العمل استفاده:
Cologuard.com/use


- بعد از آماده شدن، تست Cologuard را اجراء کنید.
- ظرف سفید نمونه را در تشناب بگذارید.
- روی چیکی تشناب بنشینید.

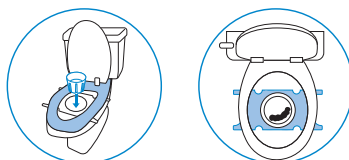

نشستن

1


- مدفوع خود را درون ظرف سفید بریزید.
- مدفوع خود را با قاشق موجود جدا کنید و درون تیوب مربوط به کیت بگذارید.

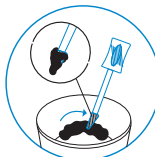

جدا کردن

2


- ظرف نمونه را با مایع نگهدارنده پر کنید.
- ظرف نمونه را درون ظرف کلان بگذارید و درپوش آنرا ببندید.

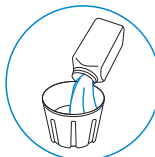

خیساندن و بستن درپوش

3

- هر دو لیبل را پر کنید.
- کیت را از طریق UPS® به Exact Sciences بفرستید.

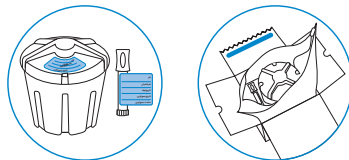

لیبل گذاری و ارسال


4

بازگرداندن سمپل رایگان است



1. برای گرفتن نوبت تحویل نمونه از UPS، به Cologuard.com/UPS مراجعه کنید یا با 1-844-870-8870 تماس شوید
2. کیت را به دفتر UPS ببرید. نشانی دفترهای محلی و ساعت تحویل در Cologuard.com/UPS ارائه شده است

*تازه‌ترین تخمین Exact Sciences بر اساس سابقه بیل مرضیان.
†برای بیشتر مرضیان، این الزام از 1 جنوری 2023 اجرائی شده است و شامل پلانهای تجاری با وضعیت معاف نمیشود.^{2,3}

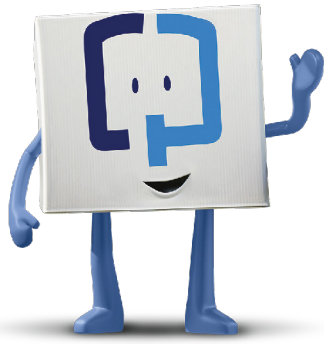

نتایج تست Cologuard®

ارائه دهنده خدمات معالجوی باید نتیجه تست شما را مدت 8 تا 10 روز بعد از وصول سмпل به Exact Sciences به شما اعلام کند.

تست Cologuard شامل بررسی تغییرات DNA و وجود خون (علائم سرطان) در مدفوع است⁴

منفی بودن نتیجه به این معناست که نشانه های احتمالی سرطان با تست Cologuard آشکار نشده است. بدین ترتیب، ابتلاء شما به سرطان کولورکتال منتفی میشود.⁴



مثبت بودن نتیجه به این معناست که علائم احتمالی سرطان با تست Cologuard آشکار شده است. مثبت بودن نتیجه به معنای مصاب شدن شما به سرطان نیست.⁴ از ارائه دهنده خدمات معالجوی خود برای تست دوم نوبت بگیرید.



گاهی نتایج مثبت و منفی کاذب (نادرست) ظاهر میشود. درباره مراحل بعدی اسکرینینگ از ارائه دهنده خدمات معالجوی راهنمایی بخواهید.⁴

معلومات و ویدئوهای بیشتر را در نشانی ذیل بیابید:
Cologuard.com/UnderstandingResults

توصیه‌ها و معلومات مصنونیت مهم

تست های Cologuard® و Cologuard Plus® برای اسکرینینگ کلانسالان 45 ساله و کلانتر که احتمال مصاب شدن آنها به سرطان کولورکتال در حد متوسط است، اجراء میشود. این تست با هدف تشخیص علامت های خاص DNA و خون در مدفوع انجام میگردد. اگر شخصاً سابقه سرطان روده کلان یا پولیپ های قبل سرطانی، امراض التهابی روده، سابقه خانوادگی سرطان روده کلان یا سیندروم های ارثی خاص دارید، یا نتیجه اسکرینینگ سرطان روده کلان در یک فاصله زمانی توصیه شده برای آن میتود اسکرینینگ، مثبت تشخیص شده باشد، از محصولات Cologuard استفاده نکنید. اگر هرکدام از این حالات درمورد شما صحیح است، با ارائه دهنده خدمات صحتی خود صحبت کنید.

نتایج تست های Cologuard باید با احتیاط تفسیر شود. مثبت بودن نتیجه تست به معنای تأیید وجود سرطان نیست. مریضان با نتیجه مثبت باید برای کولونوسکوپي معرفی شوند. منفی بودن نتیجه آزمایش به معنای نبود وجود سرطان نیست. مریضان با نتیجه منفی باید با داکتر خود مشورت کنند و ببینند که آیا تکرار تست ضروری است یا خیر. احتمال بروز نتایج مثبت و منفی کاذب وجود دارد. فقط only Rx.

مراجع: 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure.