

غربالگری سرطان کولون با آزمایش Cologuard®

Medicare و بیشتر شرکت‌های بزرگ بیمه هزینه آزمایش
Cologuard را پوشش می‌دهند.

در سطح کشور، بیش از 96% بیماران که از آزمایش
Cologuard استفاده کرده‌اند بابت غربالگری از جیب خود
هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند*1

96%

بیشتر بیماران دارای پوشش بیمه \$0 بابت
آزمایش Cologuard می‌پردازند*1

\$0

برای کسب اطلاعات بیشتر به Cologuard.com/insurance

مراجعه کنید یا با 1-844-870-8870 تماس بگیرید.

ما می‌توانیم به شما کمک کنیم پرسش‌های درستی از شرکت بیمه خود پرسید.




فیلم نحوه استفاده:
Cologuard.com/use

بیشتر شرکت‌های بیمه هزینه کولونوسکوپی دوم، پس از مثبت شدن
نتیجه غربالگری Cologuard، را پوشش می‌دهند.^{2,3}

آزمایش Cologuard را می‌توان به آسانی در منزل انجام داد


دستورالعمل‌های کامل در جعبه Cologuard ارائه شده است

- پس از آماده شدن، آزمایش Cologuard را اجرا کنید.
- ظرف سفید نمونه را در توالت بگذارید.
- روی صندلی توالت بنشینید.

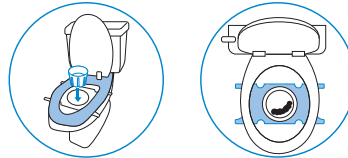


1 نشستن

- درون ظرف سفید مدفوع کنید.
- مدفوع خود را با قاشق موجود جدا کنید و درون لوله مربوط به کیت بگذارید.

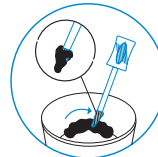


2 جدا کردن

- ظرف نمونه را با مایع نگهدارنده پر کنید.
- ظرف نمونه را درون ظرف بزرگ بگذارید و درپوش آن را ببندید.

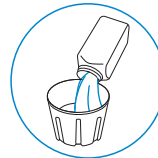

3 خیساندن و بستن درپوش

- هر دو برچسب را پر کنید.
- کیت را از طریق UPS® به Exact Sciences بفرستید.

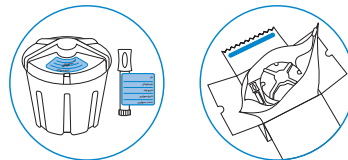

4 برچسب‌گذاری و ارسال


بازگرداندن نمونه رایگان است

1. برای گرفتن نوبت از UPS برای تحویل نمونه، به Cologuard.com/UPS مراجعه کنید یا با 1-844-870-8870 تماس بگیرید

2. کیت را به دفتر UPS ببرید. نشانی دفترهای محلی و ساعت تحویل در Cologuard.com/UPS ارائه شده است

*تازه‌ترین برآورد Exact Sciences بر اساس سابقه صورت‌حساب بیماران.

†برای بیشتر بیماران، این الزام از 1 ژانویه 2023 اجرائی شده است و شامل پلان‌های تجاری با وضعیت معاف نمی‌شود.^{2,3}

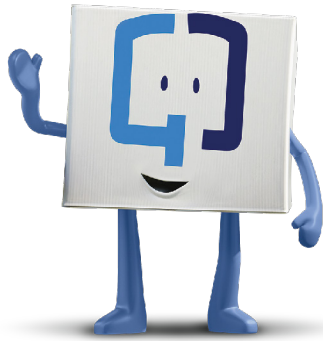

نتایج آزمایش Cologuard®

ارائه‌دهنده خدمات درمانی باید نتیجه آزمایش شما را ظرف 8 تا 10 روز پس از وصول نمونه به Exact Sciences به شما اعلام کند.

آزمایش Cologuard شامل بررسی **تغییرات DNA** و وجود **خون** (نشانه‌های سرطان) در مدفوع است⁴

منفی بودن نتیجه به این معناست که آزمایش Cologuard نشانه‌های احتمالی سرطان را پیدا نکرده است. بدین ترتیب، ابتلای شما به سرطان کولورکتال منتفی می‌شود.⁴



مثبت بودن نتیجه به این معناست که آزمایش Cologuard نشانه‌های احتمالی سرطان را پیدا کرده است. مثبت بودن نتیجه به معنای ابتلای شما به سرطان **نیست**.⁴ از ارائه‌دهنده خدمات درمانی خود یک نوبت پیگیری بگیریید.



برخی افراد نتایج مثبت و منفی کاذب (نادرست) دریافت می‌کنند. درباره مراحل بعدی غربالگری از ارائه‌دهنده خدمات درمانی راهنمایی بخواهید.⁴

اطلاعات و ویدئوهای بیشتر را در نشانی زیر بیابید:
Cologuard.com/UnderstandingResults

توصیه‌ها و اطلاعات ایمنی مهم

آزمایش Cologuard® و Cologuard Plus® برای غربالگری بزرگسالان 45 سال به بالا که احتمال ابتلای آنها به سرطان کولورکتال یا روده بزرگ در حد متوسط است، در نظر گرفته شده است. این آزمایش با هدف تشخیص نشانه‌های خاص DNA و خون در مدفوع انجام می‌گیرد. در این موارد از محصولات Cologuard استفاده نکنید: اگر سابقه شخصی سرطان روده بزرگ یا پولیپ‌های پیش‌سرطانی، بیماری التهابی روده، سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ یا سندرم‌های ارثی خاص یا نتیجه تست مثبت غربالگری سرطان روده بزرگ با استفاده از روش دیگری را در فاصله زمانی توصیه شده برای آن آزمایش دارید. اگر هر یک از این شرایط در مورد شما صدق می‌کند، با ارائه دهنده خدمات درمانی خود صحبت کنید.

نتایج آزمایش Cologuard باید با احتیاط تفسیر شوند. مثبت بودن نتیجه آزمایش به معنای تایید وجود سرطان نیست. بیماران با نتیجه مثبت باید برای کولونوسکوپی معرفی شوند. منفی بودن نتیجه آزمایش به معنای نبود وجود سرطان نیست. بیماران با نتیجه منفی باید با پزشک خود مشورت کنند و ببینند که آیا تکرار آزمایش ضروری است یا خیر. احتمال بروز نتایج مثبت و منفی کاذب وجود دارد. فقط Rx only.

مراجع: 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure.