

# Screenen Sie sich auf Darmkrebs mit dem Cologuard®-Test

Die Kosten für den Cologuard-Test werden von Medicare und den meisten großen Krankenversicherungen **übernommen**.

**0 USD** Die meisten Versicherten zahlen **0 USD** für den Cologuard-Test.<sup>1\*</sup>

**96 %** In den USA ist für mehr als **96 %** der Cologuard-Anwender für den Test keine Zuzahlung erforderlich.<sup>1\*</sup>



Erfahren Sie mehr unter [Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance) oder telefonisch unter **1-844-870-8870**.

Wir können Ihnen helfen, Ihrer Versicherung die richtigen Fragen zu stellen.

Die meisten Krankenversicherungen **erstatten die Kosten für eine Kontroll-Darmspiegelung** nach einem positiven Cologuard-Test.<sup>2,3†</sup>



Anwendung – Video:  
[Cologuard.com/use](https://Cologuard.com/use)

## Der Cologuard-Test ist **einfach** zu Hause anzuwenden.

Vollständige ausführliche Anweisungen sind im Lieferumfang zum Cologuard-Test enthalten.

- |                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>1</b> SETZEN                     |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verwenden Sie den Cologuard-Test, wenn Sie dazu bereit sind.</li><li>• Befestigen Sie den weißen Probenbehälter auf der Toilette.</li><li>• Setzen Sie sich auf die Toilette.</li></ul> |
| <b>2</b> AUFNEHMEN                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Setzen Sie Stuhl in den weißen Probenbehälter ab.</li><li>• Nehmen Sie mit dem Stäbchen etwas Stuhl auf und stecken Sie das Stäbchen wieder in das Röhrchen aus dem Kit.</li></ul>      |
| <b>3</b> EINWEICHEN UND VERSIEGELN  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Füllen Sie den Probenbehälter mit dem flüssigen Konservierungsmittel.</li><li>• Verschließen Sie den großen Behälter, in dem sich Ihre Probe befindet.</li></ul>                        |
| <b>4</b> ETIKETTIEREN UND EINSENDEN |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Füllen Sie beide Etiketten aus.</li><li>• Senden Sie dieses Kit mit UPS® an Exact Sciences.</li></ul>   |




**Senden Sie Ihre Probe kostenlos.**

1. Vereinbaren Sie die Abholung durch UPS unter [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) oder telefonisch unter **1-844-870-8870**.
2. Bringen Sie Ihr Kit zu UPS. UPS-Annahmestellen in Ihrer Nähe und die Annahmezeiten finden Sie unter [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS).

\*Jüngste Schätzung von Exact Sciences basierend auf Patientenabrechnungen.

†Für die meisten Patienten gilt dies ab 1. Januar 2023; gilt nicht für arbeitgeberbasierte Krankenversicherungsverträge mit Steuerbefreiung (USA).<sup>2,3</sup>

# Ihre Cologuard®-Testergebnisse

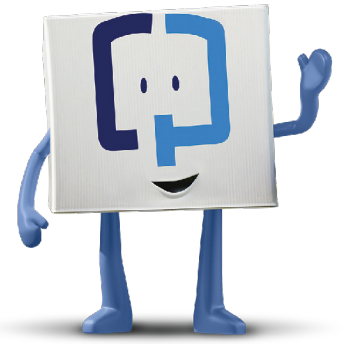

Ihrem Arzt sollten Ihre Ergebnisse innerhalb von etwa 8–10 Tagen nach Eingang Ihrer Probe bei Exact Sciences vorliegen.

Der Cologuard-Test sucht nach **veränderter DNA** und **Blut** (Anzeichen von Krebs) in Ihrem Stuhl.<sup>4</sup>



Ein negatives Ergebnis bedeutet, dass der Cologuard-Test keine möglichen Anzeichen von Krebs gefunden hat. Sie haben höchstwahrscheinlich keinen Darmkrebs.<sup>4</sup>



Ein positives Ergebnis bedeutet, dass der Cologuard-Test mögliche Anzeichen von Krebs gefunden hat. Ein positives Ergebnis bedeutet **nicht**, dass Sie Krebs haben.<sup>4</sup> Vereinbaren Sie einen Kontrolltermin bei Ihrem Arzt.

Manche Menschen erhalten falsche (unrichtige) positive oder negative Ergebnisse. Fragen Sie beim Screening immer Ihren Arzt nach den nächsten Schritten.<sup>4</sup>

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter:  
[Cologuard.com/UnderstandingResults](https://cologuard.com/UnderstandingResults)

## Anwendungsgebiete und wichtige Risikohinweise

Der Cologuard®-Test und der Cologuard Plus®-Test sind für das Screening von Erwachsenen ab 45 Jahren mit durchschnittlichem Darmkrebsrisiko durch den Nachweis bestimmter DNA-Marker und Blut im Stuhl bestimmt. Verwenden Sie Cologuard-Produkte nicht, wenn bei Ihnen in der persönlichen Vorgeschichte bereits einmal Darmkrebs oder präkanzeröse Polypen vorlagen, wenn Sie eine entzündliche Darmerkrankung haben, wenn in Ihrer familiären Vorgeschichte Darmkrebs vorkommt, wenn Sie bestimmte erbliche Syndrome haben oder wenn Sie ein positives Ergebnis bei einer anderen Darmkrebs-Screening-Methode innerhalb des empfohlenen Screening-Intervalls des anderen Tests hatten. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft.

Die Cologuard-Ergebnisse sollten mit der gegebenen Vorsicht interpretiert werden. Ein positives Testergebnis ist keine Bestätigung des Vorliegens einer Krebserkrankung. Patienten mit positivem Testergebnis sollten zur Darmspiegelung überwiesen werden. Ein negatives Testergebnis ist keine Bestätigung des Nichtvorliegens einer Krebserkrankung. Patienten mit negativem Testergebnis sollten mit ihrem Arzt besprechen, wann der nächste Test durchzuführen ist. Es können falsch positive und falsch negative Ergebnisse auftreten. Rx only.

**Literaturhinweise:** 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure.