

Cologuard® परीक्षण के साथ कोलन कैंसर के लिए स्क्रीन

Cologuard परीक्षण Medicare और अधिकांश प्रमुख बीमाकर्ताओं द्वारा कवर्ड है।

\$0

अधिकांश बीमाकृत रोगी Cologuard परीक्षण के लिए \$0 भुगतान करते हैं*

96%

देश भर में, 96% से अधिक Cologuard रोगियों की स्क्रीनिंग का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है*



Cologuard.com/insurance पर अधिक जानें या 1-844-870-8870 पर कॉल करें। सही सवाल पूछने के लिए हम आपकी बीमा कंपनी से संपर्क करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

अधिकांश बीमाकर्ता एक सकारात्मक Cologuard स्क्रीनिंग के बाद एक अनुवर्ती कोलोनोस्कोपी को कवर करते हैं।^{2,3†}




Cologuard परीक्षण को घर पर उपयोग करना आसान है

पूर्ण विस्तृत निर्देश Cologuard बॉक्स में हैं

वीडियो का उपयोग कैसे करें:
Cologuard.com/use

1


बैठें

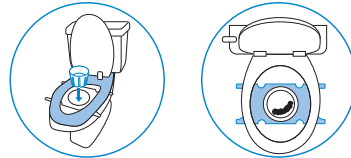

- जब आप तैयार हों तो Cologuard परीक्षण का उपयोग करें।
- अपने सफेद नमूना कंटेनर को शौचालय पर रखें।
- टॉयलेट पर बैठें।

2


खुरचें

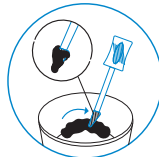

- सफेद नमूना कंटेनर में मल त्याग करें।
- अपने मल (पू) को छड़ी से खुरचें और किट से ट्यूब में वापस रखें।

3


भिगोएँ और सील करें

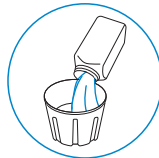

- नमूना कंटेनर को तरल परिरक्षक से भरें।
- अपने नमूने को बड़े कंटेनर के अंदर रखकर उसे बंद कर दें।

4

लेबल लगाएं और भेजें

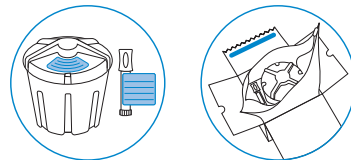

- दोनों लेबल भरें।
- इस किट को UPS® के जरिए Exact Sciences को लौटाएं।



अपना नमूना मुफ्त में लौटाएं


- Cologuard.com/UPS पर UPS पकिअप को शेड्यूल करें या 1-844-870-8870 पर कॉल करें
- अपनी किट को UPS के पास ले जाएँ। Cologuard.com/UPS पर स्थानीय स्टोर और ड्रॉप-ऑफ समय खोजें

*Exact Sciences का हालिया अनुमान ऐतिहासिक रोगी बिलिंग पर आधारित है।

†अधिकांश रोगियों के लिए, यह 1 जनवरी, 2023 को प्रभावी होगा, और छूट प्राप्त स्थिति वाली वाणिज्यिक योजनाओं पर लागू नहीं होता है।^{2,3}

आपके Cologuard® परीक्षण के परिणाम

Exact Sciences द्वारा आपका नमूना प्राप्त करने के लगभग 8-10 दिनों के बाद आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपके परिणाम उपलब्ध हो जाने चाहिए।

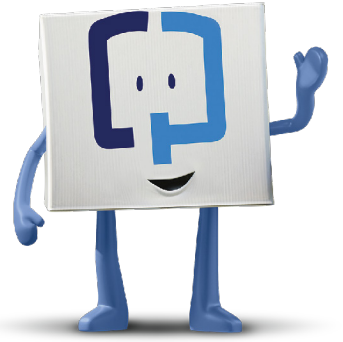

Cologuard परीक्षण आपके मल में परिवर्तित DNA और रक्त (कैंसर के लक्षण) की तलाश करता है⁴

- एक नकारात्मक परिणाम का मतलब है कि Cologuard परीक्षण को कैंसर के संभावित संकेत नहीं मिले। आपको संभवतः कोलोरेक्टल कैंसर नहीं है।⁴
- + एक सकारात्मक परिणाम का मतलब है कि Cologuard परीक्षण में कैंसर के संभावित संकेत पाए गए। एक सकारात्मक परिणाम का मतलब यह नहीं है कि आपको कैंसर है।⁴ अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ अनुवर्ती मुलाकात निर्धारित करें।

कुछ लोगों को झूठे (गलत) सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमेशा अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से स्क्रीनिंग के अगले चरणों के बारे में पूछें।⁴

अधिक जानकारी और वीडियो यहाँ पाएँ:
Cologuard.com/UnderstandingResults

संकेत और महत्वपूर्ण जोखिम सूचना

Cologuard परीक्षण का उद्देश्य 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के मल में कुछ DNA मार्करों और रक्त का पता लगाकर कोलोरेक्टल कैंसर के औसत जोखिम की जाँच करना है। यदि आपको एडेनोमा हुआ है, सूजन आंत्र रोग और कुछ वंशानुगत सिंड्रोम हैं, या कोलोरेक्टल कैंसर का व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास है तो इसका उपयोग न करें। Cologuard परीक्षण उच्च जोखिम वाले रोगियों में कोलोनोस्कोपी का प्रतिस्थापन नहीं है। 45-49 आयु वर्ग के वयस्कों में Cologuard परीक्षण के प्रदर्शन का अनुमान 50 और उससे अधिक उम्र के रोगियों के एक बड़े नैदानिक अध्ययन के आधार पर लगाया गया है।

Cologuard परीक्षण के परिणाम की सावधानी के साथ व्याख्या की जानी चाहिए। एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम कैंसर की उपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम वाले रोगियों को कोलोनोस्कोपी के लिए भेजा जाना चाहिए। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम कैंसर की अनुपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम वाले रोगियों को अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए कि कब उन्हें फिर से परीक्षण करने की आवश्यकता है। गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक नैदानिक अध्ययन में, बिना कैंसर वाले 13% लोगों ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया (गलत सकारात्मक) और कैंसर वाले 8% लोगों ने नकारात्मक परिणाम प्राप्त किया (गलत नकारात्मक)। Rx only

References: 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physicianfee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2024. Cologuard Patient Brochure.