

Профилактическое обследование на рак толстой кишки с помощью теста Cologuard®

Тест Cologuard **оплачивается** в рамках Medicare и программ большинства крупных страховщиков.



Большинство застрахованных пациентов платят за тест Cologuard **0 долларов США**^{1*}



В национальном масштабе более **96 %** пациентов не оплачивает расходы на проведение теста Cologuard из своих собственных средств^{1*}



Узнайте больше на веб-странице Cologuard.com/insurance или позвоните **1-844-870-8870**.

Мы поможем вам задать правильные вопросы вашей страховой компании.

Большинство страховщиков **оплачивают последующую контрольную колоноскопию** после положительного результата профилактического теста Cologuard.^{2,3†}




Видео об использовании:
Cologuard.com/use

Тест Cologuard **прост** в использовании в домашних условиях

Подробные инструкции находятся в коробке с тестом Cologuard

1


ПРИСЯДЬТЕ

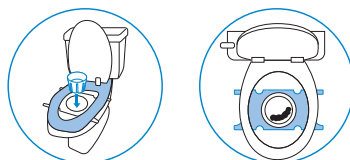

- Воспользуйтесь тестом Cologuard, когда будете готовы.
- Поместите белый контейнер с образцом в унитаз.
- Сядьте на унитаз.

2


СОБЕРИТЕ

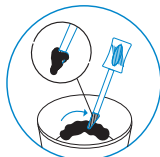

- Произведите дефекацию в белый контейнер для образца.
- Соберите палочкой стул (кал) и перенесите его в пробирку из набора.

3


ЗАЛЕЙТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ

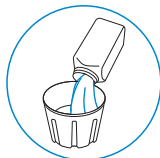

- Заполните контейнер с образцом жидким консервантом.
- Закройте большой контейнер с образцом внутри.

4

ЗАПОЛНИТЕ ЭТИКЕТКУ И ОТПРАВЬТЕ

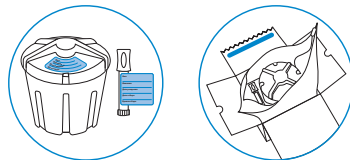

- Заполните обе этикетки.
- Отправьте этот набор в компанию Exact Sciences службой UPS®.



Отправьте свой образец бесплатно


1. Закажите отправку посылки через курьера UPS на веб-странице Cologuard.com/UPS или позвоните **1-844-870-8870**
2. Передайте свой набор в UPS. Найдите местные пункты обслуживания и часы работы на веб-странице Cologuard.com/UPS

^{*}По последним оценкам Exact Sciences на основе ранее выставленных счетов на оплату лечения пациентов.

[†]Для большинства пациентов эта услуга доступна с 1 января 2023 г. и не распространяется на коммерческие планы с освобождением от налогов.^{2,3}

Результаты вашего теста Cologuard®

Ваш лечащий врач должен получить результаты приблизительно через 8–10 дней после получения образца компанией Exact Sciences.

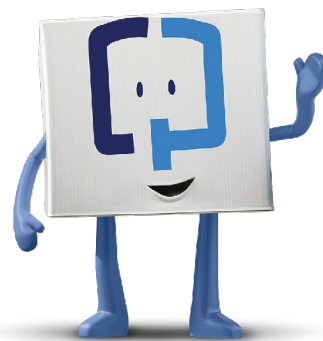

Тест Cologuard обнаруживает **измененную ДНК** и **кровь** (признаки рака) в стуле⁴



Отрицательный результат означает, что тест Cologuard не выявил возможных признаков рака. Вероятнее всего, у вас нет колоректального рака.⁴



Положительный результат означает, что тест Cologuard обнаружил возможные признаки рака. Положительный результат **не** означает, что у вас обязательно есть рак.⁴ Запишитесь на контрольный прием к врачу.

Некоторые люди получают ложные (неверные) положительные и отрицательные результаты. Всегда спрашивайте своего лечащего врача о дальнейших действиях после проведения профилактического обследования.⁴

Дополнительную информацию и видео можно найти на веб-странице:
Cologuard.com/UnderstandingResults

Показания и важная информация о рисках

Тест Cologuard предназначен для проведения профилактического обследования у взрослых в возрасте 45 лет и старше, находящихся в группе среднего риска развития колоректального рака; оно заключается в выявлении определенных ДНК-маркеров и крови в стуле. Не используйте этот метод, если у вас имеются аденомы, воспалительные заболевания кишечника и некоторые наследственные синдромы, а также если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи ранее был обнаружен колоректальный рак. Тест Cologuard не является заменой колоноскопии у пациентов из группы высокого риска. Эффективность теста Cologuard оценивалась у взрослых в возрасте 45–49 лет на основе большого клинического исследования, в котором принимали участие пациенты в возрасте 50 лет и старше.

Результаты теста Cologuard следует интерпретировать с осторожностью. Положительные результаты теста не подтверждают наличие рака. Пациентам с положительным результатом теста должна быть назначена колоноскопия. Отрицательный результат теста не подтверждает отсутствие рака. Пациентам с отрицательным результатом теста следует обсудить со своим врачом, когда им следует проходить повторный анализ. Возможно получение ложно положительных и ложно отрицательных результатов. В клиническом исследовании у 13 % обследованных без наличия рака был получен положительный (ложно положительный) результат и у 8 % обследованных с раком получили отрицательный (ложно отрицательный) результат. Rx only

Список литературы: 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physicianfee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2024. Cologuard Patient Brochure.