

# Профилактическое обследование на рак толстой кишки с помощью теста Cologuard®

Тест Cologuard **оплачивается** в рамках Medicare и программ большинства крупных страховщиков.

0  
долларов  
США

Большинство застрахованных пациентов платят за тест Cologuard **0 долларов США**<sup>1\*</sup>

96 %

В национальном масштабе более **96 %** пациентов не оплачивает расходы на проведение теста Cologuard из своих собственных средств<sup>1\*</sup>



**Узнайте больше** на веб-странице [Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance) или позвоните **1-844-870-8870**.

Мы поможем вам задать правильные вопросы вашей страховой компании.

Большинство страховщиков **оплачивают последующую контрольную колоноскопию** после положительного результата профилактического теста Cologuard.<sup>2,3†</sup>




Видео об  
использовании:  
[Cologuard.com/use](https://Cologuard.com/use)

## Тест Cologuard **прост** в использовании в домашних условиях


Подробные инструкции находятся в коробке с тестом Cologuard

### 1 ПРИСЯДЬТЕ

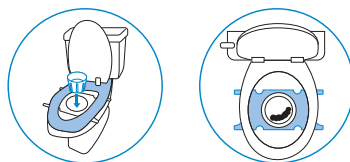


- Воспользуйтесь тестом Cologuard, когда будете готовы.
- Поместите белый контейнер с образцом в унитаз.
- Сядьте на унитаз.

### 2 СОБЕРИТЕ

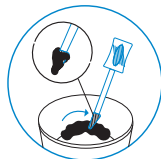


- Произведите дефекацию в белый контейнер для образца.
- Соберите палочкой стул (кал) и перенесите его в пробирку из набора.

### 3 ЗАЛЕЙТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ

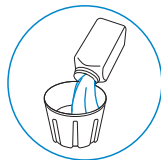

- Заполните контейнер с образцом жидким консервантом.
- Закройте большой контейнер с образцом внутри.

### 4 ЗАПОЛНИТЕ ЭТИКЕТКУ И ОТПРАВЬТЕ

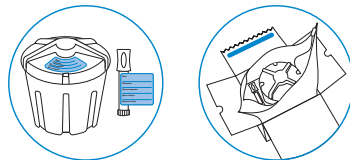

- Заполните обе этикетки.
- Отправьте этот набор в компанию Exact Sciences службой UPS®.



**Отправьте свой образец бесплатно**


1. Закажите отправку посылки через курьера UPS на веб-странице [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) или позвоните **1-844-870-8870**
2. Передайте свой набор в UPS. Найдите местные пункты обслуживания и часы работы на веб-странице [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS)

\*По последним оценкам Exact Sciences на основе ранее выставленных счетов на оплату лечения пациентов.

†Для большинства пациентов эта услуга доступна с 1 января 2023 г. и не распространяется на коммерческие планы с освобождением от налогов.<sup>2,3</sup>

# Результаты вашего теста Cologuard®

Ваш лечащий врач должен получить результаты приблизительно через 8–10 дней после получения образца компанией Exact Sciences.

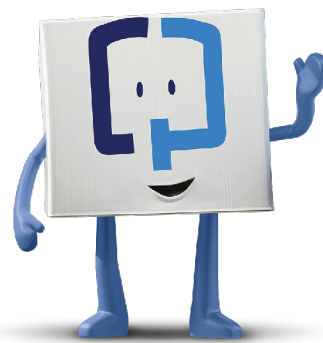

Тест Cologuard обнаруживает **измененную ДНК** и **кровь** (признаки рака) в стуле<sup>4</sup>



Отрицательный результат означает, что тест Cologuard не выявил возможных признаков рака. Вероятнее всего, у вас нет колоректального рака.<sup>4</sup>



Положительный результат означает, что тест Cologuard обнаружил возможные признаки рака.

Положительный результат **не** означает, что у вас обязательно есть рак.<sup>4</sup> Запишитесь на контрольный прием к врачу.

Некоторые люди получают ложные (неверные) положительные и отрицательные результаты.

Всегда спрашивайте своего лечащего врача о дальнейших действиях после проведения профилактического обследования.<sup>4</sup>

Дополнительную информацию и видео можно найти на веб-странице:  
**Cologuard.com/UnderstandingResults**

## Показания и важная информация о рисках

Тесты Cologuard® и Cologuard Plus® предназначены для проведения профилактического обследования у взрослых в возрасте 45 лет и старше, находящихся в группе среднего риска развития колоректального рака; оно заключается в выявлении определенных ДНК-маркеров и крови в стуле. Не используйте продукты Cologuard, если у вас в анамнезе был колоректальный рак или предраковые полипы, если вы страдаете воспалительными заболеваниями кишечника, имеете семейный анамнез колоректального рака или определенные наследственные синдромы, а также если вы получили положительный результат при использовании другого метода скрининга рака толстой кишки в течение рекомендованного интервала скрининга этого теста. Если к вам относится любая из вышеуказанных ситуаций, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Результаты теста Cologuard следует интерпретировать с осторожностью. Положительные результаты теста не подтверждают наличие рака. Пациентам с положительным результатом теста должна быть назначена колоноскопия. Отрицательный результат теста не подтверждает отсутствие рака. Пациентам с отрицательным результатом теста следует обсудить со своим врачом, когда им следует проходить повторный анализ. Возможно получение ложно положительных и ложно отрицательных результатов. Rx only.

**Список литературы:** 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard и Exact Sciences являются зарегистрированными товарными знаками компании Exact Sciences Corporation. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим правообладателям.

© 2026 Exact Sciences Corporation. Все права защищены. M-US-CG-05164\_Russian\_April 2026

 **cologuard**<sup>®</sup>  
by EXACT SCIENCES