

Sàng lọc ung thư đại tràng bằng xét nghiệm Cologuard®

Xét nghiệm Cologuard được Medicare và hầu hết các công ty bảo hiểm lớn bao trả.

\$0

Hầu hết bệnh nhân có bảo hiểm đều trả \$0 cho xét nghiệm Cologuard^{1*}

96%

Trên toàn quốc, hơn 96% số bệnh nhân sử dụng Cologuard không phải tự trả chi phí cho việc sàng lọc^{1*}



Tìm hiểu thêm tại Cologuard.com/insurance hoặc gọi số **1-844-870-8870**. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị đưa ra các câu hỏi cần thiết cho công ty bảo hiểm.

Hầu hết các công ty bảo hiểm **chi trả cho thủ thuật nội soi đại tràng trong lần khám theo dõi** sau khi có kết quả sàng lọc Cologuard dương tính.^{2,3†}




Video **hướng dẫn sử dụng**:
Cologuard.com/use

Có thể **dễ dàng** sử dụng xét nghiệm Cologuard tại nhà

Hướng dẫn chi tiết đầy đủ có trong hộp Cologuard

1


NGỒI XUỐNG

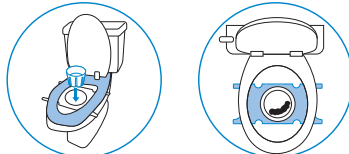

- Sử dụng xét nghiệm Cologuard khi quý vị sẵn sàng.
- Đặt lọ đựng mẫu màu trắng lên bồn cầu.
- Ngồi lên bồn cầu.

2


QUỆT LẤY MẪU

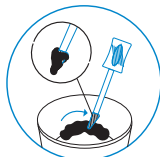

- Đi đại tiện vào hộp đựng mẫu màu trắng.
- Dùng que quẹt lấy mẫu phân rồi để que đó trở lại ống trong bộ xét nghiệm.

3


NGÂM VÀ ĐẬY KÍN

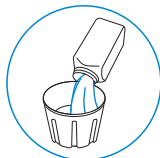

- Đổ đầy chất bảo quản dạng lỏng vào hộp đựng bệnh phẩm.
- Đậy nắp lọ đựng lớn có mẫu phân bên trong.

4

DÁN NHÃN VÀ GỬI ĐI

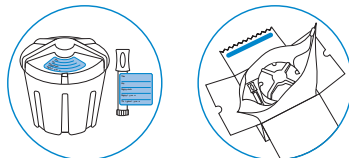

- Điền thông tin vào cả hai nhãn.
- Gửi bộ xét nghiệm này về Exact Sciences qua UPS®.



Gửi mẫu trở lại miễn phí


- Lên lịch lấy mẫu bệnh phẩm với UPS tại Cologuard.com/UPS hoặc gọi tới số **1-844-870-8870**
- Giao bộ xét nghiệm của quý vị cho UPS. Tìm các cửa hàng ở địa phương và giờ gửi mẫu tại Cologuard.com/UPS

^{*}Ước tính gần đây của Exact Sciences dựa trên dữ liệu thanh toán trước đây của bệnh nhân.

[†]Đối với hầu hết bệnh nhân, việc này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và không áp dụng cho các chương trình bảo hiểm thương mại có tình trạng miễn trừ.^{2,3}

Kết quả xét nghiệm Cologuard® của quý vị

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ có kết quả xét nghiệm sau khoảng 8-10 ngày sau khi Exact Sciences nhận được mẫu phân của quý vị.

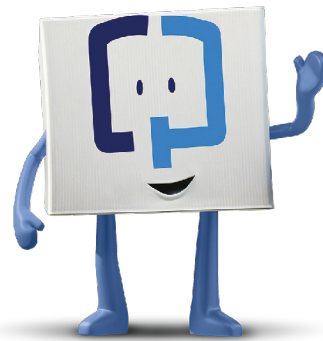

Xét nghiệm Cologuard tìm kiếm **DNA bị biến đổi** và **máu** (các dấu hiệu của ung thư) trong phân của quý vị⁴



Kết quả âm tính có nghĩa là xét nghiệm Cologuard không tìm thấy các dấu hiệu ung thư có thể có. Quý vị nhiều khả năng không mắc ung thư đại-trực tràng.⁴



Kết quả dương tính có nghĩa là xét nghiệm Cologuard đã tìm thấy các dấu hiệu có thể có của ung thư. Kết quả dương tính **không** có nghĩa là quý vị bị ung thư.⁴ Hãy lên lịch hẹn khám theo dõi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Một số người nhận được kết quả dương tính giả và âm tính giả (không chính xác).

Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe về các bước sàng lọc tiếp theo.⁴

Tìm thêm thông tin và video tại:
Cologuard.com/UnderstandingResults

Chỉ định và thông tin quan trọng về nguy cơ

Xét nghiệm Cologuard nhằm mục đích sàng lọc những người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ ở mức trung bình bị ung thư đại-trực tràng bằng cách phát hiện một số chất chỉ điểm DNA và máu trong phân. Không sử dụng bộ xét nghiệm đó nếu quý vị bị u tuyến, bệnh viêm ruột và một số hội chứng di truyền hoặc cá nhân hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư đại-trực tràng. Xét nghiệm Cologuard không phải là phương pháp thay thế cho nội soi đại tràng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Hiệu quả của xét nghiệm Cologuard ở người trưởng thành từ 45-49 tuổi được ước tính dựa trên một nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn gồm các bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.

Kết quả xét nghiệm Cologuard cần phải được diễn giải một cách thận trọng. Kết quả xét nghiệm dương tính không xác nhận việc có bệnh ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính cần phải được giới thiệu đi nội soi đại tràng. Kết quả xét nghiệm âm tính không xác nhận việc không có bệnh ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính cần phải thảo luận với bác sĩ nếu bệnh nhân đó cần xét nghiệm lại. Có thể xảy ra trường hợp kết quả dương tính giả và âm tính giả. Trong một nghiên cứu lâm sàng, 13% số bệnh nhân không mắc ung thư nhận được kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% số bệnh nhân mắc ung thư nhận được kết quả âm tính (âm tính giả). Rx only

Tài liệu tham khảo: 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed May 22, 2025. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physicianfee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2024. Cologuard Patient Brochure.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard và Exact Sciences là các nhãn hiệu đã đăng ký của Exact Sciences Corporation. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2025 Exact Sciences Corporation. Bảo lưu mọi quyền. M-US-CG-06574_Vietnamese_May 2025

 **cologuard®**
by EXACT SCIENCES