


بادر بإجراء فحص سرطان القولون مع Cologuard®

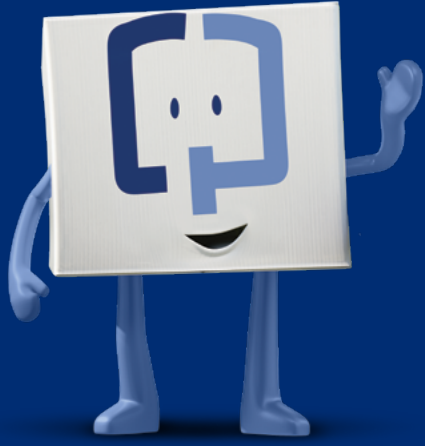

cologuard®
Rx only

صُمم Cologuard لفحص البالغين الذين يبلغون من العمر 45 عامًا فأكثر، المعرضين بدرجة متوسطة لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. لا يُستخدم إلا بوصفة طبيب.

يُرجى الاطلاع على معلومات المخاطر المهمة على ظهر الدليل.

اعتنِ بنفسك عن طريق إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم

ويُعد من أكثر أنواع السرطان التي يمكن
الوقاية منها ومع ذلك فهو أقلها فعليًا¹

يتزايد عدد المصابين به في الأشخاص الأكبر من
50 عامًا²

عند اكتشاف المرض في المراحل المبكرة، تزداد
قابلية العلاج في حوالي 90% من الأشخاص^{3*}

لهذا السبب ينبغي أن يكون إجراء الفحص في أوانه
جزءًا من فحوصاتك الطبية المنتظمة

*بناءً على معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 أعوام.

يكشف Cologuard عن الإصابة بسرطان القولون حتى في مراحله المبكرة^{4،5}

يُعد Cologuard خيار فحص غير باضع. يمكنك
إجراؤه في منزلك بما يضمن لك الخصوصية. لا توجد
استعدادات ولا حاجة إلى وقت مستقطع ولا حاجة لتغيير
النظام الغذائي أو الدواء.

يكشف Cologuard عن الإصابة
بـ 92% من إجمالي حالات السرطان⁴



يكشف Cologuard عن الإصابة
بـ 94% من حالات السرطان في
المرحلة الأولى والثانية⁵



وقد تم تقدير أداء Cologuard لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم
بين 45 و49 بناءً على دراسة سريرية أجريت على نطاق عريض من
المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا فأكثر. في هذه الدراسة
السريرية، كانت نتائج 13% من غير المصابين بالسرطان إيجابية
(إيجابية خاطئة)، بينما كانت نتائج 8% من المصابين بالسرطان سلبية
(سلبية خاطئة).

يُرجى الاطلاع على معلومات المخاطر المهمة على ظهر الدليل.

يدفع معظم المرضى الخاضعين للتأمين 0 دولارًا*

يتمتع اختبار Cologuard بالتغطية التأمينية من
برنامج Medicare وأغلب شركات التأمين الكبرى

على المستوى القومي، أكثر من 94% من المرضى
المستخدمين لاختبار Cologuard لا يدفعون أي
تكاليف من مالهم الخاص لإجراء الاختبار.*

*يعتمد تقدير Exact Sciences على تاريخ إصدار الفواتير للمريض
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2021. يختلف معدل التغطية حسب الولاية والمنطقة.
قد تطبق استثناءات للتغطية، ولا يمكن لأحد سوى شركة التأمين الخاصة بك
تأكيد كيفية تغطية اختبار Cologuard لحالتك.

تعرف على المزيد

عن التأمين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني
Cologuard.com/insurance

يمكن لفريقنا من المتخصصين مساعدتك على التواصل مع شركتك
التأمينية وطرح الأسئلة المناسبة.

اتصل بنا على الرقم 1-844-870-8870

دواعي الاستخدام ومعلومات مهمة عن المخاطر

صُمم Cologuard لفحص البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر المعرضين بدرجة متوسطة لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق الكشف عن واسمات معينة في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA)، ووجود دم في البراز. ولا يُستخدم Cologuard إذا كنت مصابًا بأورام غدية، أو تعاني من مرض التهاب الأمعاء وبعض المتلازمات الوراثية، أو تاريخ طبي شخصي أو عائلي بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ولا يعتبر Cologuard بديلاً عن منظار القولون التشخيصي في حالة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بدرجة مرتفعة. وقد تم تقدير أداء Cologuard لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 بناءً على دراسة سريرية أجريت على نطاق عريض من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا فأكثر.

ينبغي تفسير نتيجة اختبار Cologuard بعناية. فلا تؤكد نتيجة الاختبار الإيجابية الإصابة بالسرطان. وينبغي إحالة المرضى الذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية لإجراء منظار القولون التشخيصي. وبالمثل، لا تؤكد نتيجة الاختبار السلبية عدم الإصابة بالسرطان. ينبغي أن يناقش المرضى الذين حصلوا على نتيجة اختبار سلبية مع طبيبهم متى ينبغي لهم إجراء الاختبار مرة أخرى. فقد تظهر نتائج اختبار سلبية وإيجابية خاطئة. في دراسة سريرية، كانت نتائج 13% من غير المصابين بالسرطان إيجابية (إيجابية خاطئة)، بينما كانت نتائج 8% من المصابين بالسرطان سلبية (سلبية خاطئة). لا يُستخدم إلا بوصفة طبيب.

مراجع:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227.
2. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Colorectal cancer statistics, 2020. *CA Cancer J Clin.* 2020;70(3):145-164. doi:10.3322/caac.21601
3. National Cancer Institute. Cancer stat facts: Colorectal cancer. Accessed July 16, 2021. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.
5. Cologuard® Physician Brochure. Madison, WI: Exact Sciences Corporation.

ما محتويات مجموعة الأدوات؟



صندوق شحن



أنتوب



حاوية العينة



مادة حافظة سائلة



كيف تعيد مجموعة أدواتك



دليل المريض



ملصقات العينة



حامل

كيفية استخدام مجموعة أدوات Cologuard



1 بمجرد استلامك لمجموعة أدواتك، أخرج محتويات العبوة وراجع دليل المريض المرفق.

2 ضع حاوية عينتك في حامل دورة المياه.

3 استخدم مجموعة أدوات Cologuard لجمع عينتك.

4 اكشط جزءًا من العينة، ثم أضف المادة الحافظة إلى حاوية العينة. احرص على الكتابة على كلا الملصقين.

5 باستخدام ملصق UPS® المدفوع مسبقًا، أعد شحن الصندوق إلى معمل Exact Sciences Laboratories في غضون 24 ساعة من جمع العينة. حدد موعدًا لتسليم UPS العينة بدون مخالطة عن طريق الاتصال بنا على الرقم 1-844-870-8870 أو بادر بزيارة الموقع الإلكتروني CologuardTest.com/UPS. وقد تتلقى منا مكالمات مفيدة لتذكيرك بإعادة مجموعة أدواتك.

6 سيقوم مقدم رعايتك الصحية صاحب الطلب بتزويدك بنتيجتك بعد استلامها في المختبر بحوالي أسبوعين. يمكنك معرفة المزيد حول ما تعنيه النتائج من خلال زيارة Cologuard.com/UnderstandingResults

يتاح الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

اتصل بالرقم 1-844-870-8870 أو تحدث معنا من خلال زيارة Cologuard.com




افتح هذا التذكير لمساعدتك في إعادة مجموعة أدوات Cologuard في مكان تحتفظ به عادةً بالتذكيرات - مثل الحمام أو الثلاجة.

يرجى إعادة مجموعة أدواتك في موعد أقصاه:



يسهل استخدامي!

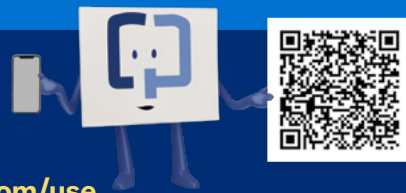

Cologuard.com/use

باستخدام كاميرا هاتفك الذكي، مررها فوق رمز الاستجابة السريع (رمز QR) لمشاهدة فيديو عن كيفية الاستخدام.

cologuard®
Rx only

EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard علامة تجارية مسجلة لشركة Exact Sciences Corporation

جميع العلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2021 محفوظة لشركة Exact Sciences Corporation. جميع الحقوق محفوظة.
US.CG.2859-5 أغسطس 2021