


## Dépistage du cancer colorectal avec Cologuard®

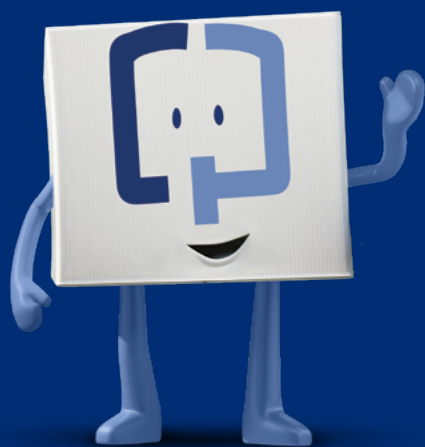

Cologuard est indiqué pour le dépistage du cancer colorectal chez les adultes de 45 ans et plus présentant un risque moyen. Seulement sur ordonnance.

Veuillez consulter les informations importantes concernant les risques au dos de cette brochure.

## Prenez soin de vous avec le dépistage du cancer colorectal

Le cancer colorectal est souvent considéré comme la forme de cancer la plus facile à éviter. Pourtant, il est souvent négligé<sup>1</sup>

Les cas sont en augmentation chez les personnes de moins de 50 ans<sup>2</sup>

Détecté à un stade précoce, il se soigne dans 90 % des cas<sup>3\*</sup>

C'est la raison pour laquelle un dépistage en temps opportun devrait faire partie de vos bilans de santé réguliers

\*Fondé sur une survie de 5 ans.

## Cologuard détecte le cancer colorectal même à des stades précoces<sup>4,5</sup>

Cologuard est une option de dépistage non invasive que vous pouvez utiliser dans l'intimité de votre domicile. Il ne demande aucune préparation, aucun jour de congé ni aucun changement dans votre alimentation ou vos médicaments.



Globalement, Cologuard détecte **92 %** des cancers<sup>4</sup>



Cologuard détecte **94 %** des cancers aux stades I et II<sup>5</sup>

L'efficacité de Cologuard chez les adultes de 45 à 49 ans se fonde sur une vaste étude clinique menée auprès de patients de 50 ans et plus. Lors de cette étude clinique, 13 % des personnes non atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat négatif (faux négatif).

Veuillez consulter les informations importantes concernant les risques au verso.

## Pour la plupart des patients assurés, le coût est de **0 \$**\*

Cologuard est pris en charge par Medicare et la plupart des compagnies d'assurance

À l'échelle nationale, plus de 94 % des patients Cologuard n'ont aucun frais à déboursier pour le dépistage.\*

\*Estimation d'Exact Sciences fondée sur l'historique de facturation aux patients au 30 juin 2021. Le taux de couverture varie selon l'État et la région. Il peut exister des exceptions à la couverture. Seul votre assureur peut confirmer la façon dont Cologuard serait couvert dans votre cas.

### Obtenez plus d'informations

sur l'assurance en vous rendant sur  
[Cologuard.com/insurance](https://cologuard.com/insurance)

Notre équipe de spécialistes peut vous aider à contacter votre compagnie d'assurance pour lui poser les bonnes questions. Appelez-nous au **+1 (844) 870-8870**



**Détachez ce rappel pour vous aider à retourner votre kit Cologuard** et placez-le à un endroit où vous laissez habituellement vos notes, comme votre salle de bains ou votre réfrigérateur.



**Veillez retourner votre kit au plus tard le :**




**Je suis facile à utiliser !**

[Cologuard.com/use](https://Cologuard.com/use)

Scannez le code QR avec la caméra de votre smartphone pour regarder le tutoriel vidéo.

N'oubliez pas de retourner votre Kit de prélèvement Cologuard !

## Mode d'emploi de votre kit Cologuard

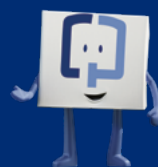

- 1 Une fois que vous aurez reçu votre kit, déballez-le et consultez le guide du patient ci-joint.
- 2 Placez le récipient de prélèvement dans le support pour toilettes.
- 3 À l'aide de votre kit Cologuard, recueillez votre échantillon.
- 4 Frottez votre échantillon, puis remplissez le récipient de prélèvement avec le liquide de conservation. Veillez également à remplir les deux étiquettes.
- 5 À l'aide de l'étiquette UPS® prépayée, renvoyez la boîte au laboratoire Exact Sciences le jour même ou le jour suivant le prélèvement. Programmez une collecte UPS sans contact en nous appelant au +1 (844) 870-8870 ou en vous rendant sur le site [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS). Il se peut que vous receviez des rappels utiles de notre part vous invitant à renvoyer votre kit.
- 6 Votre médecin traitant vous transmettra le résultat environ deux semaines après la réception de l'échantillon au laboratoire. Pour en savoir plus sur la signification des résultats, rendez-vous sur le site [Cologuard.com/UnderstandingResults](https://Cologuard.com/UnderstandingResults)

**Assistance disponible 24 h/24, 7 j/7**

Appelez-nous au **+1 (844) 870-8870** ou discutez avec nous sur le site [Cologuard.com](https://Cologuard.com)

## Contenu de votre kit



**Boîte d'expédition**



**Liquide de conservation**



**Guide du patient**



**Support**



**Tube de prélèvement**



**Récipient de prélèvement**



**Procédure de retour de votre kit ?**



**Étiquettes pour échantillon**

## Indications et informations importantes sur les risques

Cologuard est indiqué pour le dépistage du cancer colorectal chez les adultes de 45 ans et plus présentant un risque moyen. Il permet de détecter certains marqueurs d'ADN ainsi que la présence de sang dans les selles. Vous ne devez pas l'utiliser si vous avez eu un adénome, si vous souffrez d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de certaines maladies héréditaires ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal. Cologuard ne peut pas remplacer la coloscopie chez les patients à risque élevé. L'efficacité de Cologuard chez les adultes de 45 à 49 ans se fonde sur une vaste étude clinique menée auprès de patients de 50 ans et plus.

Les résultats du test Cologuard doivent être interprétés avec prudence. Un test positif ne confirme pas la présence d'un cancer. Les patients ayant obtenu un résultat positif doivent être orientés vers une coloscopie diagnostique. De même, un test négatif ne confirme pas l'absence de cancer. Les patients ayant obtenu un résultat négatif doivent consulter leur médecin pour savoir quand répéter le test. Des faux positifs et des faux négatifs peuvent se produire. Lors d'une étude clinique, 13 % des personnes non atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat négatif (faux négatif). Seulement sur ordonnance.

### RÉFÉRENCES :

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227. doi:10.1093/jnci/djp273
2. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Colorectal cancer statistics, 2020. *CA Cancer J Clin.* 2020;70(3):145-164. doi:10.3322/caac.21601
3. National Cancer Institute. Cancer stat facts: Colorectal cancer. Consulté le 16 juillet 2021. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297. doi:10.1056/NEJMoa1311194
5. Cologuard® Physician Brochure. Madison, WI: Exact Sciences Corporation.

**EXACT SCIENCES**

**cologuard®**  
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
[ExactSciences.com](https://ExactSciences.com) | [ExactLabs.com](https://ExactLabs.com) | +1 (844) 870-8870

Cologuard est une marque déposée d'Exact Sciences Corporation.  
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
©2021 Exact Sciences Corporation. Tous droits réservés. US.CG.2859-5 août 2021